



twion[®]
BOOSTEZ VOTRE FAUTEUIL

alber[®]

Mobile. Tout simplement.





DÉPASSEZ LES LIMITES.

Aujourd'hui, ce qui importe le plus c'est : la mobilité. C'est pourquoi notre mode de transport doit être adapté à notre mode de vie dynamique : efficace, élégant et facile. La technologie innovante d'Alber procure la solution pour une mobilité accrue.

La nouvelle assistance électrique twion offre liberté et indépendance. La motorisation équipée de moteurs ultra performants et d'une électronique à la pointe de la technologie vous procure une puissance décuplée à chaque mouvement de propulsion. Le capteur placé sur la main courante calcule précisément l'aide à apporter. La motorisation très compacte et silencieuse est très simple d'utilisation. La conduite active vous aide à atteindre votre destination rapidement, à moindre effort.



RESSENTEZ LA VITESSE.

Plus vite et plus loin : les moteurs dynamiques assure une grande force de propulsion et ce jusqu'à 10 km/h.*

Vous profitez pleinement de cette facilité de conduite. Le système de récupération d'énergie recharge votre batterie pendant les phases de freinage et augmente leur autonomie d'environ 10 % pour encore plus de liberté.

*avec le pack Mobility Plus en option.

DECOUVREZ L'INDEPENDANCE.

Les voitures jouent un rôle essentiel dans notre vie et sont devenues des compagnons indispensables. La technologie sophistiquée du twion en complément de la voiture vous apporte un maximum de flexibilité dans vos déplacements. Les roues peuvent être retirées facilement en appuyant sur le bouton d'axe à démontage rapide, servant également à extraire la roue.

Dans le choix des matériaux, tout a été pensé pour minimiser le poids : aluminium, plastique haut de gamme et haute technologie de moteurs ont été optimisés. Le résultat : les roues pèsent 6 kg chacune, batteries inclus, quoi de plus léger.

* Selon la version



LA CONNECTION INTELLIGENTE.

Les smartphones sont devenus des outils essentiels de communication dans notre vie moderne. Il est donc tout naturel que le twion s'adapte à cette technologie grâce au Pack Mobility Plus, pour communiquer avec les smartphones Android. L'App téléchargeable sur Google Play Store, vous permet d'obtenir des informations sur le niveau de charge des batteries, la distance parcourue et l'affichage de parcours via un GPS. Pour ceux désirant une conduite plus sportive, le profil de conduite peut être adapté à leurs désirs.


Si un problème potentiel survient, la fonction diagnostic vous aidera à localiser l'origine du problème et le cas échéant de contacter notre Service Clients.



UNE PREMIERE MONDIALE : LE BLUEDRIVE.

L'innovante fonction BlueDrive permet de piloter les fauteuils équipés de roues motrices twion à distance en utilisant un smartphone* comme une télécommande sans fil. Les capteurs d'inclinaison intégrés dans le smartphone permettent de piloter le fauteuil à distance en inclinant légèrement le smartphone ou avec le joystick virtuel.

* Dans un souci de sécurité, le BlueDrive ne doit être utilisé que sans occupant dans le fauteuil.

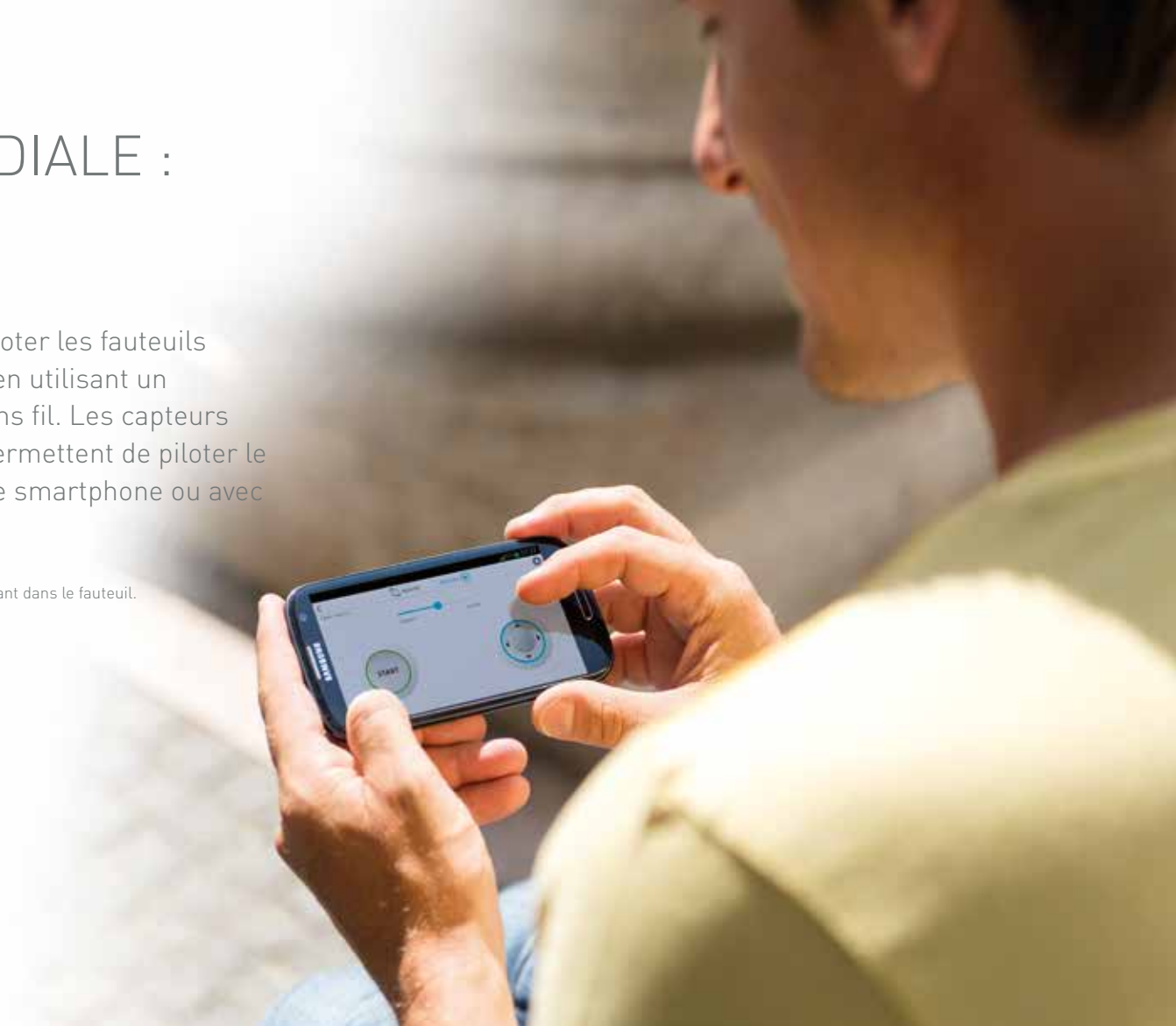

Les fonctions du Pack Mobility Plus :



Pour smartphone avec
système Android



Manipulateur
BlueDrive



Information de
conduite



Système de
configuration



Mode Sport/ECO



Mode Silence



Mode mémorisation
parcours



Service Virtuel



Navigation
EasyNavi



En bref

Poids par roue :	6 kg
Vitesse :	jusqu'à 10 km/h avec le pack Mobility Plus*
Autonomie :	de 12 à 20 km
Connexion :	Bluetooth (Smartphones Android)
Module batteries :	batteries lithium ion * 36 mois de garantie.
Technologies :	BlueDrive, EasyConnex, récupération d'énergie

* Disponible en option



GOÛTEZ AU DESIGN.

Exclusif, simple et beau. Chaque matériel a été optimisé pour améliorer le design. Un mélange de transition en douceur et de combinaison de couleurs distinctes. Alber fixe les normes de qualité les plus élevées pour les matériaux et la conception.

De plus, Alber offre différents coloris et différents types de pneus pour satisfaire les souhaits de chaque utilisateur en terme de design.



RECHARGEMENT

Une autre innovation est l'utilisation des connecteurs du chargeur EasyConnex. Utilisant la force magnétique, les connecteurs de charge trouvent automatiquement leur bonne position sur les roues.

5 LEDS indiquent le niveau de charge des batteries. Après seulement 4 heures de charge, 80 % de la capacité est de nouveau disponible. Le connecteur de charge sert également de bouton marche/arrêt démontrant notre volonté d'un design multifonctionnel et minimaliste.

RESTEZ FLEXIBLE

Le twion est compatible avec la majorité des fauteuils roulants actifs rigides ou pliants. Chaque personne peut conserver son fauteuil actuel et le twion s'adapte dessus grâce à deux fixations simples et légères installées sur le châssis du fauteuil.

Grâce à l'axe à démontage rapide, rien de plus simple que d'interchanger les roues manuelles du fauteuil par les roues du twion! Cela signifie que vous pouvez à tout moment utiliser les roues manuelles ou les roues à assistance électrique !



twion[®]
BOOSTEZ VOTRE FAUTEUIL



Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France
Tel. : +33 2 47 62 64 16
Fax : +33 2 47 62 69 13
Email : alberactif@invacare.com
www.invacare.fr



Flashez pour recevoir la
documentation !