

Action^{®3}_{NG} Action^{®3}_{NG} Light et Action^{®3}_{NG} Light Xtra



Encore plus léger, compact,
et multi-configurable !



Yes, you can.

Le mythique **Action³_{NG}** est configurable et offre une large gamme d'options et d'accessoires intercompatibles pour répondre aux différents besoins des utilisateurs.

Grâce à sa plateforme commune et son intercompatibilité avec les autres produits de la famille **Action**, il permet de s'adapter aux besoins des utilisateurs.

- **Action³_{NG} Light** : le fauteuil roulant le plus léger de la gamme **Action**, à partir de 13 kg seulement !
- **Action³_{NG} Héli** équipé d'une manchette gouttière avec système de rotation par pas de 18°.
- **NOUVEAU : Action³_{NG} Light Xtra**, la version suréquipée du célèbre **Action³_{NG} Light**. Tout aussi léger et aussi configurable.



Léger et transportable

Déjà le fauteuil roulant manuel le plus léger de sa catégorie, **Action³_{NG}** peut s'alléger encore de 1.2kg grâce aux supports de fourche allégés et aux nouvelles roues arrière Actives proposées de série sur le modèle **Action³_{NG} Light**. En plus de son faible poids qui facilite le transport, **Action³_{NG} Light** propose également un dossier rabattable sur l'assise qui permet de réduire un peu plus l'encombrement pour qu'il puisse rentrer dans la plus petite des voitures.

Confort et fonctionnalité

Le mécanisme du dossier rabattable de **Action³_{NG} Light** rend le transport du fauteuil plus facile. La gâchette de verrouillage des accoudoirs facilite le déverrouillage et les transferts.



Configurable et modulaire

L'intercompatibilité des accessoires et des options à travers toute la famille **Action** fait que chaque fauteuil est configurable et modulable. Par conséquent, **Action³_{NG}** s'adapte à l'évolution des besoins de l'utilisateur et propose de nombreuses options de personnalisation.

Créé pour s'adapter

Des **couleurs tendances** et le revêtement de dossier apportent encore plus de possibilités de personnalisation pour les utilisateurs. La conception optimisée des toiles de dossier bi-matière noires permet de s'adapter autour des cannes de dossier pour un plus grand confort. Les toiles de dossier réglables en tension une sangle et quatre sangles bi-matière noires disposent d'une sangle lombaire réglable en hauteur ce qui offre un meilleur positionnement pour les utilisateurs.



Légèreté

Avec un poids standard de 14.2kg et un poids de transport de 7,5 kg **Action³_{NG}** répond aux besoins en matière de transport, de stockage et de praticité. De plus, le fauteuil **Action³_{NG} Light** offrant une configuration plus légère permet d'obtenir un poids de **fauteuil complet à partir de 13 kg !**



Poignée de freins

Les poignées de freins de la famille **Action** sont escamotables pour faciliter les transferts latéraux.



Repose-jambes à compensation

Réglable en inclinaison de 0° à 75° par pas de 5°. Blocage automatique à l'angle souhaité. Appui-mollets réglables en hauteur et en profondeur. Livrés avec sangles talonnières.



Protège-vêtements

La découpe des protège-vêtements avec leur poignée d'appui ergonomique facilite les transferts.



Accoudoirs relevables et amovibles

La gâchette de verrouillage sur les accoudoirs relevables et amovibles permet un déverrouillage rapide même avec des fonctions limitées au niveau de la main.



Dossier réglable en angle et rabattable sur **Action³_{NG} Light**

Notre technologie unique et brevetée provenant du fauteuil **Action⁵** permet un réglage en angle du dossier avec l'utilisateur assis dans son fauteuil. Le réglage en continu de l'angle de -15° à +15° du dossier facilite les essais et l'adaptation du fauteuil aux besoins de chaque utilisateur. L'échelle de réglage en angle du dossier est intégrée au système pour plus de précision. La fonction rabattable du dossier permet de réduire l'encombrement du fauteuil pour le stockage.



20 positions de roues arrière possibles

Possibilité d'ajuster la hauteur d'assise ainsi que le centre de gravité.



Dossier inclinable par vérins

Les vérins gaz permettent une inclinaison en continu et en douceur pour l'utilisateur et assistent la tierce personne.

Caractéristiques et options

200x32



150x30



125x30



Roues avant

Les roues avant sont disponibles en 5", 6" et 8" pneumatique ou bandage avec des largeurs différentes. Désormais les roues sont disponibles en bandage noir non marquant.

Les coussins d'assise

Les coussins d'assise

Invacare propose une large gamme de coussins d'assise qui répondent aux besoins de chaque utilisateur. La gamme s'étend du coussin à prévention d'escarres modérée aux coussins à très haute prévention comme le coussin de positionnement **Invacare Matrx Libra**. Retrouvez toute notre gamme de coussins et de dossiers de positionnement **Matrx** sur notre site internet.



Coussin d'assise **Classic Visco**

Coussin 100% en mousse viscoélastique à mémoire de forme. Plat et réversible. 4 tailles au choix qui s'adaptent aux dimensions de l'assise du fauteuil. Disponible en option montée.



Ceintures de positionnement **Bodyspoint®**

Ceintures 2 points ou 4 points rembourrées et confortables pour un bon positionnement. Disponibles en option montée.

Les types de dossiers


En plus du dossier fixe, (0° ou 7°), **Action³ NG** et **Action³ NG Light** offrent 4 types de dossiers différents pour répondre aux besoins des utilisateurs :

- ① Dossier pliant à mi-hauteur
- ② Rabattable et réglable en angle (-15°/+15°)
- ③ Incluable par crémaillères (0°/30°)
- ④ Incluable par vérins (0°/30°)



Toiles de dossier bi-matière noires

Cette toile de dossier réglable en tension bi-matière entièrement noire a été optimisée pour épouser au mieux les cannes de dossier. La sangle lombaire est ajustable en hauteur par scratch pour les dossiers réglables en tension une sangle et quatre sangles. Elle permet un meilleur positionnement.

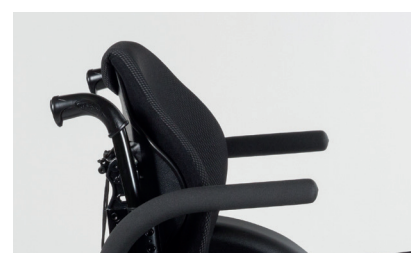

Accoudoirs tubes

Les accoudoirs tubes escamotables peuvent être choisis en option pour donner un look encore plus actif à l'**Action³ NG Light**. Ils sont systématiquement livrés avec des garde-boues.

Les accoudoirs

- ① Relevables et amovibles, ② Relevables, amovibles et réglables en hauteur.
- ③ ④ et ⑤ Amovibles et réglables en hauteur ⑥ Manchettes confort, ⑦ Gouttières, ⑧ Garde-boues amovibles et réglables en hauteur.

Les différentes versions de l'**Action³_{NG}**



Invacare **Action³_{NG} Light**

Le fauteuil le plus léger de la gamme **Action³_{NG}**. Il offre de série des roues arrière Actives, des supports de fourche allégés en aluminium et une toile de dossier réglable en tension bi-matière noire incluant une pochette à l'arrière. Poids du fauteuil complet à partir de 13 kg !



Invacare **Action³_{NG} Light Xtra**

La version suréquipée du célèbre **Action³_{NG} Light** qui offre de série : un dossier réglable en tension 4 sangles avec toile bi-matière rembourrée, une paire de gouttières étroites sans rotation – version courte, un coussin d'assise **Matrx Contour Visco_{NG}**, une paire de roulettes anti-bascule et un kit accroche-taxi.



Invacare **Action³_{NG} Dual HR™**

Système breveté de double main courante doté d'un démontage rapide. La main courante intérieure est réservable pour s'adapter à chaque utilisateur. Désormais disponible en 22" et 24", compatible avec les hauteurs d'assise de 410 mm et 385 mm.



Invacare **Action³_{NG} Levier Pendulaire**

Ce système de propulsion apporte aux utilisateurs ayant des capacités musculaires limitées la possibilité de se propulser avec un seul bras.



Invacare **Action³_{NG} Héli**

Fauteuil équipé de la nouvelle manchette gouttière avec système de rotation ergonomique par pas de 18°.

Appui palmaire au choix : plat, à corne ou bombé.



Invacare **Action³_{NG} Comfort**

Fauteuil léger configurable de confort et pliant par croisillon. Assise et dossier en revêtement PU bi-extensible noir. Dossier inclinable par vérins et coussin de dossier enveloppant pour un maintien optimal.



Invacare **Action³_{NG} Transit**

La version Transit offre des hauteurs d'assise de 460, 485 et 510 mm avec des roues arrière en bandage de 12". Largeur hors-tout = largeur d'assise + 160 mm. Disponible en dossier inclinable ou dossier pliant à mi-hauteur.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Pente d'assise	Hauteur d'assise	Angle de dossier	Hauteur du dossier	Angle des potences
<i>Invacare Action³ NG¹, Action³ NG Light[®] et Light Xtra[®]</i>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 555 mm*	400 / 450 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	325 - 510 mm	80° / 0 - 75°
<i>Invacare Action³ NG Transit</i>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	7° / 0° - 30°	430 / 510 mm	80° / 0 - 75°

	UL	Hauteur des accoudoirs	Largeur hors-tout	Largeur pliée hors-tout	Longueur hors-tout avec potence	Longueur hors-tout sans potence	Hauteur hors-tout
<i>Invacare Action³ NG¹, Action³ NG Light[®] et Light Xtra[®]</i>	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Largeur d'assise + 190 mm	295 mm	980 - 1105 mm	835 - 960 mm	820 - 1050 mm
<i>Invacare Action³ NG Transit</i>	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Largeur d'assise + 160 mm	260 mm	950 - 1050 mm	710 - 910 mm	920 - 1050 mm

	Pente max. de stabilité	Rayon de giration	Poids max. utilisateur	Poids du fauteuil	Poids de transport
<i>Invacare Action³ NG¹, Action³ NG Light[®] et Light Xtra[®]</i>	9°	870 mm	125 kg	14.2 kg <i>Action³ NG</i> 13 kg <i>Action³ NG Light</i>	7.5 kg <i>Action³ NG</i> 7.1 kg <i>Action³ NG Light</i>
<i>Invacare Action³ NG Transit</i>	9°	870 mm	125 kg	13.5 kg	10.7 kg



Coloris de châssis

Violet Hypnotique Noir Mat Bleu Pop Rouge Mat Bleu Acqua



Blanc Perle Gris Ardoise Vert Electrique Noir Anthracite



Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

Revêtement du siège

Nylon Noir

