

rea[®]

Azalea[®] Family



Une grande famille



Yes, you can.[®]

Les fauteuils *Invacare Rea **Azalea*** apportent un confort et une personnalisation pour chaque utilisateur grâce à une large gamme de modèles et à de nombreuses options.

Pour répondre à des besoins spécifiques, *Rea* a développé un ensemble de produits adaptés. Ces fauteuils forment la famille **Azalea** et bénéficient de caractéristiques uniques pour répondre aux attentes de chaque patient.

L'ensemble des modèles de la famille **Azalea** bénéficie de nombreux réglages pour offrir un bon positionnement.

Déjà connu pour leur système d'assise réglable en largeur et en profondeur, ces fauteuils bénéficient des mêmes possibilités d'ajustement au niveau du dossier indépendamment de l'assise.

*Rea **Azalea Family*** offre de nombreuses solutions de positionnement pour s'adapter aux différentes morphologies : le dossier réglable en tension **Flex 3** à double courbure est réversible, permettant de choisir entre une courbure basse pour les utilisateurs lordosés ou de forme gynœïde (femmes) ou bien une courbure haute pour les utilisateurs souhaitant une grande ouverture de bassin ou de forme androïde (hommes).

Guide de choix du dossier Flex 3: plaque ou réglable en tension

Plaquette (Rég. en tension)	Plaquette (Rég. en tension)	Plaquette (Rég. en tension)	Plaquette (Rég. en tension)	Plaquette (Rég. en tension)
				
Petite taille	Grande taille	Taille moyenne	Obésité	Epaules larges
Réglage au plus proche de la morphologie	Augmenter la hauteur du dossier et la profondeur d'assise	Léger ajustement par rapport aux réglages d'origine	Augmenter la largeur d'assise et de dossier	Dossier plus large que l'assise

Plaquette (Rég. en tension)	Plaquette (Rég. en tension)	(Rég. en tension)	(Rég. en tension)	Plaquette (Rég. en tension)
				
Bassin large	Ventre proéminent	Fessier proéminent	Cyphose	Lordose
Assise plus large que le dossier	Libérer de l'espace au niveau des épaules	Libérer de l'espace au niveau du fessier	Dossier détendu à mi-hauteur et tendu en bas pour épouser la forme du dos	Bas du dossier tendu et les autres parties épousent la forme de la colonne.

◀ Caractéristiques et options

Dossier Flex 3 réglable en hauteur et en largeur. Les tubes de dossier peuvent être inclinés vers l'intérieur ou l'extérieur.

Plaquette de dossier Flex 3 réglable en hauteur et en largeur. Poignées réglables en hauteur.



Multi-réglable multi-positions

Rea **Azalea** est le choix naturel pour une personne modérément active ou ayant un faible maintien du tronc. Le système d'inclinaison du siège par translation permet à l'utilisateur d'alterner les positions d'assise et ainsi de profiter d'un confort maximum dans toutes les situations. Doté d'une bonne maniabilité, le fauteuil **Azalea** est le choix idéal pour un confort et un positionnement optimal.



◀ Rea Azalea

Equippé de roues arrière 24" ou 22" selon la hauteur d'assise souhaitée.

Mécanisme d'inclinaison unique DSS (Dual Stability System)

Le Rea **Azalea** et le Rea **Azalea Assist** bénéficient d'une assise qui s'incline à 25° par translation, ainsi que d'un dossier inclinable à 30°. L'inclinaison de l'assise et du dossier peuvent être gérées manuellement ou électriquement. La version électrique apporte une plus grande autonomie à l'utilisateur en lui permettant d'agir seul.



◀ Rea Azalea Assist

Version transit équipée de roues arrière de 16".

Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

								
Azalea / Assist	390-440/ 440-490/ 490-540 (390- 490/ 440-540/ 490-590 mm)	430 - 500 mm	400/450 mm	540 - 790 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1° à 23° (+1° à 25°)	0°-30°
								
Azalea / Assist	Largeur d'assise + 220 /230 mm (Largeur d'assise + 250 mm avec freins tambour) / 280 mm	900-1250 mm	950 - 1035 mm	34 kg (en largeur 440 mm)	Max 135 kg	16,5 kg	ISO 7176-19	

Coloris du châssis ▼



Revêtement du siège ▼



Rea Azalea Base et Alber viaplus V12

Rea **Azalea Base** est conçu pour les personnes qui cherchent à adapter un corset-siège sur un châssis roulant de qualité. Dérivé du fauteuil de confort de référence, le Rea **Azalea** bénéficie des mêmes avantages, et notamment, du système DSS (**Dual Stability System**®). Les freins tambour montés de série permettent un meilleur contrôle du fauteuil par la tierce-personne.



Rea Azalea Base

Ce châssis bénéficie d'une inter-compatibilité au niveau des pièces et accessoires avec les autres modèles de la famille **Azalea**.

Alber viaplus V12

Grâce à ce système d'assistance à la poussée et au freinage, la tierce-personne n'a plus d'effort à fournir pour pousser le fauteuil. Toutes les fonctions d'origine du fauteuil restent utilisables.



Rea Azalea & Alber viaplus V12

Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Largeur d'assise ▼	Profondeur d'assise ▼	Hauteur d'assise ▼	Hauteur du dossier ▼	Hauteur des accoudoirs ▼	UL ▼	Bascule d'assise ▼	Inclinaison de dossier ▼
340/390/ 440/490 mm (+ 50/100 mm)	380 - 450 mm ¹ 430 - 500 mm	400/450 mm	600 ¹ / 700 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1° à 23° (22 / 24") (+1° à 25°) (16")	0° - +30°
Largeur hors-tout ▼	Hauteur hors-tout ▼	Longueur hors-tout avec potence ▼	Poids du fauteuil ▼	Poids max. utilisateur ▼	Poids de transport ▼		
+ 220 / 230 mm (Largeur+250 mm avec freins tambour) / 280 mm	900 - 1300 mm	950 - 1035 mm	20 kg	Max 135 kg	15 kg		
				1. Pour largeur d'assise 340 mm			

1. Pour largeur d'assise 340 mm

Coloris du châssis ▼



Rea **Azalea Minor** - Conçu pour les personnes de petite taille et les adolescents

Le fauteuil Rea **Azalea Minor** est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d'une assise de petite largeur et de petite profondeur. Développé à partir du fauteuil Rea **Azalea**, **Azalea Minor** hérite de la même fiabilité et du même système d'inclinaison d'assise DSS par translation. De nombreux coloris du châssis sont disponibles, ainsi qu'un large choix d'options et accessoires.

Rea **Azalea Tall** - Le confort et le positionnement pour les personnes de grandes tailles

Rea **Azalea Tall** est spécialement conçu pour répondre aux besoins morphologiques des personnes de grande taille grâce notamment à une profondeur et une hauteur d'assise supérieures au reste de la gamme. Développé sur la base du fauteuil Rea **Azalea**, l'**Azalea Tall** profite de la même fiabilité et du système d'inclinaison DSS.



◀ Rea **Azalea Minor**

Les poignées de poussée orientées vers l'extérieur du fauteuil apportent plus de confort pour la tierce-personne qui le manipule.



◀ Rea **Azalea Tall**

Profondeur d'assise rallongée et hauteur d'assise rehaussée pour s'adapter aux segments jambiers grands.

Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

								
Azalea Tall	390-440/440-490/490-540 mm	480 - 550 mm	500 mm	540 - 790 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1° à 23° (+1° à 25°)	0° - 30°
Azalea Minor	340 mm (+50/100 mm)	380 - 450 mm	400/450 mm	430 - 500 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	+1° à 25°	0° - 30°

								
Azalea Tall	Largeur d'assise + 220 mm	1000 - 1300 mm	950 - 1085 mm	34 kg	Max 135 kg	18,7 kg	ISO 7176-19	
Azalea Minor	Largeur d'assise + 220 /230 mm (250 mm avec freins tambour) / 280 mm	900 - 1250 mm	900 - 970 mm	32 kg	Max 75 kg	14,5 kg	ISO 7176-19	

Coloris du châssis ▼



Revêtement du siège ▼



Fauteuil bariatrique de confort et de positionnement

Le Rea **Azalea Max** est conçu pour répondre à la morphologie des personnes en surcharge pondérale jusqu'à 180 Kg. Il offre des largeurs d'assise de 550 à 710 mm. Grâce à **Azalea Max**, Invacare offre une gamme complète de fauteuil de confort et de positionnement adaptée aux besoins spécifiques de chacun: **Azalea Family**.

Système DSS

Rea **Azalea Max** offre toutes les caractéristiques déjà éprouvées du fauteuil Rea **Azalea**, et reprend notamment le système d'inclinaison assisté à compensation avec maintien du centre de gravité DSS (**Dual Stability System**). La bonne répartition du poids du corps entre le dossier et les repose-jambes permet d'assurer une très bonne stabilité.



Rea Azalea Max

Conçu pour les utilisateurs de forte corpulence



Dossier double courbure

Le dossier est réversible, permettant de choisir entre une courbure basse pour les utilisateurs lordosés ou gynoides (femmes) ou une courbure haute pour les utilisateurs souhaitant une grande ouverture de bassin ou androïdes (hommes).


Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Azalea Max	550; 610 + 50 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 627 mm	1° - 20°	0°-30°
Azalea Max Assist	550; 610 + 100 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 627 mm	1° - 20°	0°-30°

Azalea Max	Largeur d'assise + 250 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1135 mm	54 kg	max. 180 kg	33 kg ¹	ISO 7176-19	COMPATIBLE
Azalea Max Assist	Largeur d'assise + 220 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1135 mm	54 kg	max. 180 kg	37 kg ¹	ISO 7176-19	

Coloris du châssis ▼

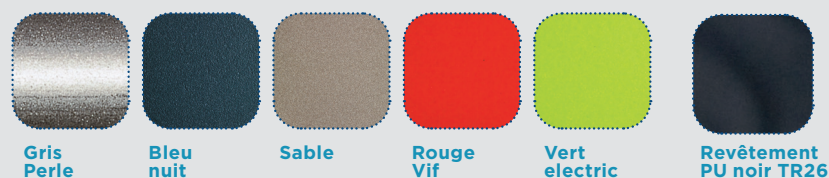

Revêtement du siège ▼

