

Mini Joystick ASL



Mini Joystick proportionnel



Yes, you can.

Le **Mini joystick ASL** est un joystick proportionnel qui ne nécessite qu'une force minimale de 18g pour permettre à l'utilisateur de se déplacer.

Il convient particulièrement aux personnes ayant une force musculaire ou des mouvements limités.

La proportionnalité permet une conduite plus précise.

Un appui vertical sur le joystick permet un accès à l'ensemble des fonctionnalités du fauteuil et l'utilisation sera facilitée grâce à l'amplitude de mouvement possible du joystick.

NOUVEAU : Le contacteur peut être désactivé dans la programmation LiNX.



Nombreux accessoires


Monté sur un fauteuil équipé de l'électronique **LiNX**, le mini joystick ASL inclut un contacteur pour faire défiler les fonctions et un module Bluetooth pour un accès simplifié aux ordinateurs et autres appareils. Il ne nécessite pas d'interface additionnelle et peut être installé rapidement et facilement sur le fauteuil. Ce joystick est programmable. Plus de types d'embouts sont disponibles, comme un champignon, une boule de liège ou encore une cupule menton.

Disponible en option montée sur les fauteuils *Invacare TDX SP2 Ultra Low Maxx* et *Invacare TDX SP2^{NB} Ultra Low Maxx*.

Compatible LiNX

Le **mini joystick ASL** est entièrement compatible avec l'électronique **LiNX**. Il est également disponible en option montée sur nos fauteuils roulants électriques *Invacare TDX SP2*, *TDX SP2^{NB}*, *Storm⁴* et *AVIVA*.

Caractéristiques et options

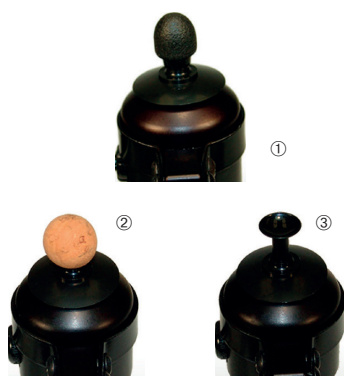

Trois embouts au choix

- ① Champignon (Ø 15mm),
- ② Boule de liège (Ø 19mm),
- ③ Cupule menton (Ø 15mm).

Support pour montage en position centrale

Support tablette

Dimensions : 150 mm x 100 mm

Données techniques

Force de déflexion	18g
Pression vers le bas permet de changer de fonction.	
Diamètre de l'embase	43 mm

Références (électronique LiNX)

SP1607756	Mini joystick proportionnel ASL, livré avec cupule menton, boule de liège, champignon
SP1640290	Tablette support mini joystick ASL
SP1637857	Kit d'adaptation pour montage en bout de manchette
SP1582573	Support mini joystick ASL pour montage en position centrale
SP1582572	Interface de montage du mini joystick ASL sur tube rond Ø 13 mm