


Flo-tech™ Solution Xtra™



Yes, you can.®

Le coussin **Solution Xtra** est un coussin en gel viscofluide recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m³. La nappe de gel est complète et recouvre toute la base en mousse HR, sa conception est brevetée car dotée de poches individuelles sous chaque ischion pour prévenir les risques de talonnement et assurer un maximum de prévention par immersion dans le gel. Le gel fluide permet d'assurer un positionnement stable tout en assurant une prévention d'escarres pour risque élevé. La base en mousse est galbée pour favoriser le bon alignement des cuisses et est dotée de velcro pour permettre le rajout de cales.

Le traitement anti-bactérien **Ultra Fresh™** est désormais appliqué au coussin **Flo-tech Solution Xtra**. Ce traitement limite la prolifération des bactéries et rend ainsi la mousse encore plus résistante aux odeurs et aux moisissures.

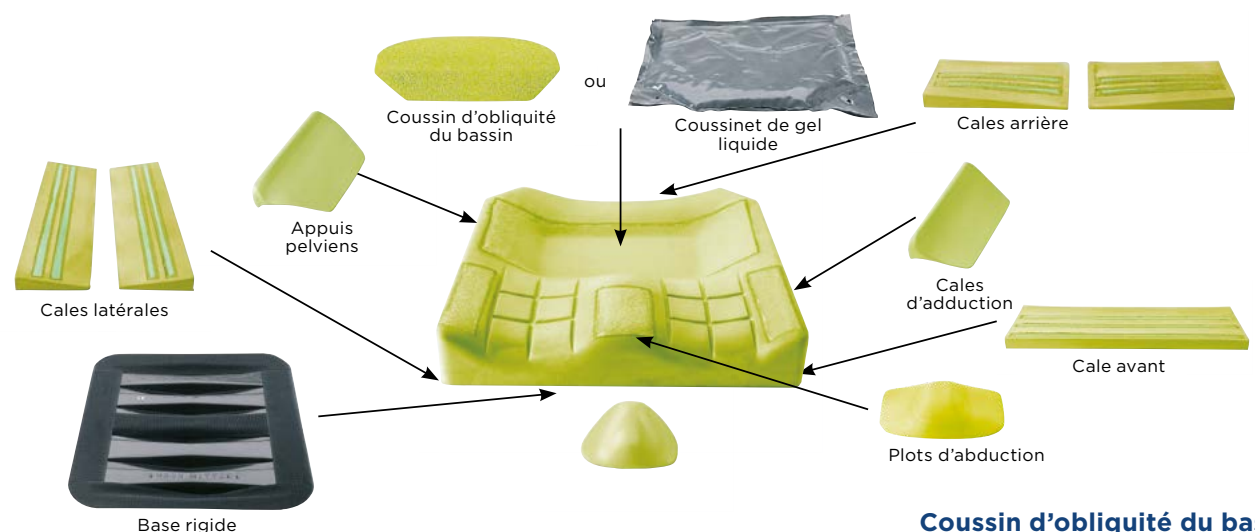

Coussin d'obliquité du bassin
Permet de suivre ou de corriger une obliquité du bassin.
Compatible avec **Image & Solution Xtra**

Coussinet de gel liquide
Limite la pression sur les ischions en cas de glissement vers l'avant. Idéal pour lutter ou suivre une faible obliquité du bassin.
Compatible avec **Image & Solution Xtra**

Biseaux fessiers
Empêchent la rotation externe des hanches. Participent à l'alignement des cuisses.
Compatibles avec **Image & Solution Xtra**

Butées d'adduction
Réduisent l'adduction et la rotation externe des hanches en guidant l'alignement des fémurs. Stabilisent les fémurs.
Compatibles avec **Solution Xtra**

Appuis pelviens
Favorisent l'alignement des hanches. Le long d'un axe médian en guidant l'alignement des 2 fémurs le long de l'assise. Stabilisent le bassin.
Compatibles avec **Solution Xtra**

Plots d'abduction
Finalisent l'alignement des 2 fémurs et empêchent les 2 faces latérales internes des genoux de se frotter l'une contre l'autre. Maintiennent les articulations des hanches dans une bonne position. Existents en 2 tailles. Compatibles avec **Solution Xtra**

Base rigide
Lutte contre l'effet hamac d'une assise en toile. Stabilise le bassin sur un plan horizontal.
Compatible **Image & Solution Xtra**. Compatible avec tous les coussins Invacare.

Biseaux latéraux
Améliorent la stabilité latérale pelvienne. Participent à la rotation interne des hanches.
Compatibles avec **Image & Solution Xtra**

Biseau crural
Aide à stabiliser le bassin. Lutte contre une rétroversion éventuelle du bassin. Permet de changer l'angle d'assise.
Compatible avec **Image & Solution Xtra**

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur	Poids	Poids max utilisateur	Revêtement extérieur lavable en machine à
						
360 à 600 mm	330 à 550 mm	A : 85 mm/ B : 85 mm	60 mm	A partir de 3,08 kg	140 kg	80°

Flo-tech
Solution Xtra

