



Le travail d'équipe est la clé du succès !

Invacare **Storm³ FFH** est un fauteuil roulant électrique spécifiquement conçu pour répondre aux fortes exigences du Foot-Fauteuil. Grâce à son unique « programme football » le **Storm³ FFH** offre une accélération et une puissance imbattable pour remporter la partie. Son pare-choc amovible est facile à installer, et parfaitement conçu pour taper dans le ballon. La traction des roues avant, la puissance du moteur, le pare-choc arrière et son électronique sur mesure, permet aux joueurs d'avoir un réel contrôle du jeu... Essayez-le, et vivez votre propre expérience du **Storm³ FFH!**

* FFH : Fédération Française Handisport

Trusted Solutions, Passionate People





Kit de compétition

Invacare **Storm³ FFH** est équipé d'un kit spécial pour pratiquer le Foot-Fauteuil dans les meilleures conditions. Ce kit de compétition comprend deux moteurs de 400 W pour augmenter la puissance du fauteuil, des amortisseurs plus durs pour une meilleure adhérence, et un système de refroidissement de l'électronique pour réguler la température. Ce kit permet d'exploiter à 100%, les performances du fauteuil.

Conduite sportive


Le **Storm³ FFH** a tout d'un fauteuil sportif. Sa conduite est paramétrable grâce au logiciel WIZARD qui permet de régler sa réactivité et sa nervosité selon les attentes du joueur. Ses roues arrière à crampons améliorent son adhérence et ses petites roues avant lui offre une bonne giration. Tous ces équipements font du **Storm³ FFH**, le fauteuil pour gagner le match !

Caractéristiques et options



Pare-choc avant

Le pare-choc avant amovible, homologué par la FIPFA, est en option. Son design est conçu spécifiquement pour taper dans le ballon.

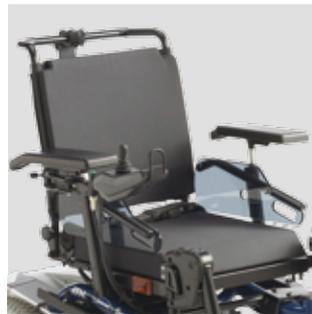

Assise et dossier

L'inclinaison d'assise électrique de 0° à 25 ° est en option. Le réglage du dossier sur 6 positions se fait manuellement.



Commande électronique

Le **Storm³ FFH** est équipé d'une commande électronique évolutive **ACS-2** (manipulateur REM24SD). Elle est escamotable et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques

Storm³ FFH	440 - 480 mm (430 mm)	410/460/ 510 mm	450 mm Ajustable 425-500 mm	480 mm ¹	250 - 340 mm	290 - 470 mm	0° - 20°
							-10°/0°/7.5°/ 15°/22.5°/30°

Storm³ FFH	630 mm	970 mm	1100 mm	116 kg ²	73,5 Ah
			Sans pare-choc	Sans pare-choc	

Storm³ FFH	1660 mm	60 mm	18%	2*400 W 4 pôles	10 km/h
					30 km

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France
Tel. : +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

© 2016 Invacare International Sàrl
Tous droits réservés.

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.

Storm3FFH - FR - 08/2016

Coloris du châssis



Bleu

Revêtement



Nylon Noir

1/ Sans coussin de siège.
2/ 2 + 5 kg avec déclencheurs électriques



Fabrication spéciale en option : différentes fabrications sur le fauteuil sont possible (taille accessoires, coloris avec RAL). Veuillez contacter votre Service Clients pour toutes demandes de devis et de délais.
Pour plus d'informations, de détails techniques, références et autres options, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du fauteuil.



Yes, you can.®