

Dolomite[®] Gloss[®]



**La combinaison parfaite du style
et de la robustesse**

LÉGER | MULTIFONCTIONNEL | ROBUSTE



Passez à l'action avec le Gloss

Dolomite élargit sa gamme de rollators avec la famille **Gloss**. Conçu pour aider les utilisateurs lors de leurs déplacements, le **Dolomite Gloss** est le rollator idéal pour renforcer l'indépendance. Stable et robuste, le rollator possède toutes les valeurs fondamentales de la gamme **Dolomite** en incluant un look moderne et soigné.

Disponible avec 4 hauteurs d'assise de 450mm à 680mm, le **Gloss** peut accueillir une variété de patients allant jusqu'à 160kg. Une large gamme d'accessoires est disponible afin d'adapter au mieux les rollators aux conditions de l'utilisateur et à leurs besoins.

Extrêmement léger et maniable, ce rollator pèse seulement 5,9 kg*. Son châssis en aluminium permet un transport et un stockage sans effort. Le châssis pliant par croisillon propose un large espace de marche, tandis que l'assise solide offre du confort pour les utilisateurs qui nécessitent un maintien supplémentaire. Pour plus de sécurité, le **Gloss** a intégré un retour audible et visuel afin d'accompagner le mécanisme de pliage et de dépliage.

Avec sa faculté d'adaptation, sa qualité et sa stabilité, le **Gloss** permettra à tous les utilisateurs de se déplacer de manière sécurisée et avec style.



*Le poids varie selon le modèle.

Transport et stockage facile



Le châssis du **Gloss** se plie jusqu'à obtenir une largeur extrêmement étroite, facilitant le stockage dans des petits espaces. Le design du rollator signifie qu'il peut également être stocké à la verticale de manière sécurisée lorsqu'il n'est pas utilisé.

La légèreté du **Gloss** permet au rollator d'être facilement soulevé par l'utilisateur ou l'aidant pour être rangé dans le coffre d'une voiture permettant les déplacements et offrant ainsi davantage d'indépendance.

CLÉS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



1 Un large espace de marche

- ▶ L'espace de marche confortable à l'intérieur du châssis favorise une posture droite et une liberté dans les mouvements.

2 Poignées ergonomiques, réglables en hauteur

- ▶ Les poignées ergonomiques peuvent être réglées en hauteur afin de s'adapter à toutes les tailles d'utilisateurs.



3

- ▶ La conception brevetée de l'assise en 3 parties permet le pliage et le dépliage simple et compact.

4 Un châssis léger, pliant par croisillon

- ▶ Extrêmement léger (à partir de 5,9 kg) et avec une largeur pliée de 190mm, le rollator peut être facilement soulevé et rangé.

5 Adaptation aux besoins individuels

- ▶ Disponible en 4 hauteurs d'assise différentes, avec une large gamme d'accessoires qui permettent au rollator de s'adapter aux besoins de l'utilisateur.

Caractéristiques clés supplémentaires

- ▶ Des freins de parking permettant de s'arrêter et de se reposer sans effort.
- ▶ Sangle de verrouillage pour un stockage sécurisé lorsque le produit n'est pas utilisé.
- ▶ Panier pliant de série, facile d'accès, disponible pour le transport des objets.
- ▶ Le monte trottoir en option offre plus de sécurité et d'indépendance.
- ▶ Accessoires compatibles avec tous les modèles de la famille **Gloss**.

4 caractéristiques clés et leurs avantages



◀ Un châssis léger, pliant par croisillon

La légèreté du **Gloss** est un des avantages principaux de ce rollator. Elle permet aux utilisateurs et aux aidants de le soulever et de le ranger dans un coffre de voiture pour le transporter.

En plus d'être extrêmement léger, le poids maximal de l'utilisateur sur le **Gloss** est de 160 kg. Grâce à son design, le rollator plié devient très compact ce qui facilite son stockage dans de petits espaces.




◀ S'adapte aux besoins individuels

Le **Gloss** est disponible avec 4 hauteurs d'assise: 450mm, 520mm, 600mm, 680mm, afin de convenir à toutes les tailles de patients. Le rollator dispose d'une large gamme d'accessoires qui lui permettent de s'adapter davantage en fonction de la condition du patient et de ses besoins spécifiques.



◀ Un large espace de marche

Caractéristique de tous les rollators **Dolomite**, le **Gloss** possède un large espace de marche. Conçu pour promouvoir une posture droite, cette zone de confort offre aux utilisateurs un support et une liberté dans leurs déplacements.

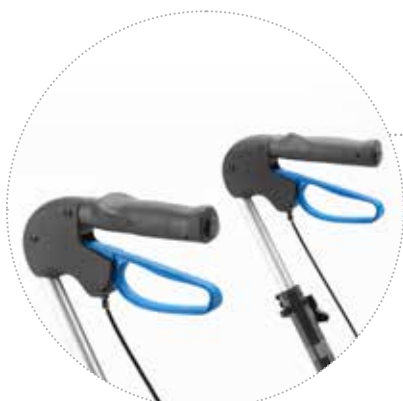

◀ Poignées ergonomiques, réglables en hauteur

La hauteur des poignées du **Gloss** peut être rapidement et facilement ajustée afin de satisfaire les plus grands en dévissant simplement la molette positionnée à l'extérieur du châssis. Les poignées ergonomiques peuvent également pivoter vers l'intérieur à 20° pour répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs.

Présentation de la famille ***Dolomite Gloss***

**Le nouveau rollator de la gamme réputée Dolomite.
Conçu pour le style et la robustesse.**



	<i>Gloss 450</i>	<i>Gloss 520</i>	<i>Gloss 600</i>	<i>Gloss 680</i>
Hauteur hors-tout	635 - 770 mm	725 - 860 mm	795 - 920 mm	915 - 1050 mm
Poids max. utilisateur	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg
Hauteur d'assise	450 mm	520 mm	600 mm	680 mm
Poids net	5.9 kg	6.3 kg	6.5 kg	6.8 kg

Accessoires disponibles :

- ▶ **Sangle de dossier:** Offre du confort, de la sécurité et du maintien pendant que l'utilisateur est assis.
- ▶ **Porte canne:** Facilite l'accès à la canne.
- ▶ **Panier pliant:** Peut être facilement retiré ou gardé sur le rollator plié.
- ▶ **Tablette:** amovible, pour le transport de livre, de nourriture ou de boissons.
- ▶ **Monte trottoir:** Aide supplémentaire simplifiant le passage d'un trottoir ou d'un obstacle.
- ▶ **Kit de poignée hémiplégique:** Option supplémentaire pour les clients ayant une seule main ou après un AVC.*
- ▶ **Frein de ralentissement:** Dispositif de sécurité permettant de ralentir la vitesse de marche.*
- ▶ **Support pour avant-bras:** Offre une assistance pour ceux qui en ont besoin, comme les personnes atteintes d'arthrite.*
- ▶ **Extension de frein:** Assure une force de freinage supplémentaire pour ceux qui manquent de force dans les mains.
- ▶ **Panier rigide:** Panier résistant disponible pour les modèles 520, 600 & 680.
- ▶ **Porte bouteille à oxygène:** Compatible avec la plupart des bouteilles.*
- ▶ **Frein unilatéral:** Permet d'actionner les deux freins avec une seule main.*
- ▶ **Tige porte-sérum***



*Disponible prochainement

Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.



Largeur hors-tout ▼



Profondeur ▼



Largeur entre les roues ▼



Hauteur hors-tout ▼



Hauteur d'assise ▼

Dolomite Gloss ⁴⁵⁰	518 mm	615 mm	423 mm	635 - 770 mm	450 mm
Dolomite Gloss ⁵²⁰	595 mm	675 mm	501 mm	725 - 860 mm	520 mm
Dolomite Gloss ⁶⁰⁰	602 mm	720 mm	509 mm	795 - 920 mm	600 mm
Dolomite Gloss ⁶⁸⁰	609 mm	790 mm	501 mm	915 - 1050 mm	680 mm



Largeur entre les poignées ▼



Diamètre des roues ▼



Poids max. utilisateur ▼



Poids net ▼

Dolomite Gloss ⁴⁵⁰	370 mm	200 mm	160 kg	5.9 kg
Dolomite Gloss ⁵²⁰	445 mm	200 mm	160 kg	6.3 kg
Dolomite Gloss ⁶⁰⁰	445 mm	200 mm	160 kg	6.5 kg
Dolomite Gloss ⁶⁸⁰	445 mm	200 mm	160 kg	6.8 kg

Coloris ▼



Gris

Codes ▼

- ▶ **1650807** *Dolomite **Gloss** - Hauteur 450 mm*
- ▶ **1649835** *Dolomite **Gloss** - Hauteur 520 mm*
- ▶ **1649836** *Dolomite **Gloss** - Hauteur 600 mm - Modèle Standard*
- ▶ **1650808** *Dolomite **Gloss** - Hauteur 680 mm*

Tel: **+33 2 47 62 64 00**
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

INVACARE POIRIER S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

