

NordBed™ Essential



DESIGNÉ POUR LE DOMICILE |
PRÉVENTION DES CHUTES | CONFORT



Yes, you can.®

Le Nordbed Essential offre un design convivial lui permettant de s'adapter à tout type d'environnement. Robuste et polyvalent, son usage convient au domicile comme aux collectivités. Grâce à son confort avancé et des fonctionnalités simples, les utilisateurs pourront se positionner dans leur lit en toute confiance. Sa hauteur minimale de seulement 28 cm, procure un sentiment sécurité durant toute la nuit.

Confort et sécurité

L'auto-régression intégrée **réduit les cisaillements** de manière significative lors de la mise en position assise du patient ainsi, elle améliore la **répartition de la pression**.

La longueur optimisée du plan de couchage est ajustée selon des mesures anthropométriques. Permettant ainsi, de parfaitement **s'adapter et soulager** l'ensemble des utilisateurs.

Pour les personnes de grande taille, une extension en longueur de 10 cm est possible grâce aux rallonges intégrées à chaque extrémité du lit.

Sa faible hauteur facilite également des **transferts en toute sécurité**. Les personnes de petite taille peuvent également atteindre le sol et se lever aisément.



Design

Le NordBed Essential propose une large gamme de panneaux modernes et épurés, allant d'une surface peinte aux finitions bois.

Grâce à son **design conçu pour le domicile**, il s'adapte aux besoins et goûts personnels de chacun. Il peut être configuré à l'aide d'un large choix de barrières, panneaux latéraux et plus encore.



Des conditions de travail idéales pour le personnel soignant

- ▶ Freins centraux en option
- ▶ Panneaux de lit facilement amovibles
- ▶ Hauteur réglable de 28 à 83 cm

4

DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1

Auto-regression

- ▶ Réduction des cisaillements et décompression de la région pelvienne lors de l'inclinaison du dossier

3

Inclinaison du dossier et plicature des genoux en simultanée

- ▶ Maintien optimal et réduction des glissements
- ▶ Meilleure répartition de la pression durant la séquence de mouvement

2

Hauteur minimale de 28 cm seulement

- ▶ Roulettes standards de 10 cm
- ▶ Transfert en toute sécurité
- ▶ Prévention des chutes

4

Plan de couchage optimisé

- ▶ Longueur des sections définie selon des mesures anthropométriques, s'adapte à chaque morphologie

Caractéristiques supplémentaires

- ▶ **Option : Système de freinage central**
 - Manoeuvrer en toute sécurité
 - Manipulation aisée pour le personnel soignant
- ▶ **Option : Procline et Déclive**
 - Aide le personnel à repositionner le patient en minimisant l'effort
 - Ajustement simple et redistribution de la pression
- ▶ **Plateforme de matelas extensible intégrée**
 - Gagnez 10 cm de longueur grâce aux rallonges intégrées à chaque extrémité du lit





► Des couleurs facilement reconnaissables ont été sélectionnées en collaborations avec des experts

Télécommande ▲

Des couleurs intuitives pour les utilisateurs malvoyants

Données techniques ▼


Pour plus d'information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d'utilisation et de maintenance disponibles sur www.invacare.fr



Largeur ext. /
Largeur int. ▼



Longueur ext. /
Longueur int. ▼

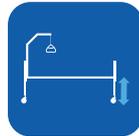

Hauteur plan de
couchage ▼



Section de plan
de couchage ▼



Garde au sol ▼



Angle
plicature ▼

NordBed Essential

100 / 90 cm

213 / 200 cm

28 - 82 cm

80-16-30-64 cm

15 cm

0 - 37°



Angle repose-
jambes ▼



Proclive/
Déclive ▼



Poids max.
utilisateur ▼



Poids total
(sans les
panneaux) ▼



Poids de la
partie la plus
lourde ▼

NordBed Essential

0 - 5°

+/-15°


170 kg

90 kg

90 kg

NB: Le lit ne doit pas être utilisé par des patients âgés de moins de 12 ans ou par des patients dont la taille est équivalente à celle d'un enfant de 12 ans.

Couleur du châssis ▼

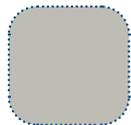

Gris

Coloris des panneaux ▼



Hêtre



Chêne



Noyer



Blanc