

Gamme VENDLET

Drap de glisse motorisé



Prévention des TMS et Confort

Rotation et repositionnement en douceur dans le lit
pour un maximum de confort Soignant et Patient




Des rotations sans effort

L'aide au retournement motorisée qui se charge des efforts à votre place

Le système motorisé VENDLET est un dispositif de retournement motorisé, monté sur lit, destiné au repositionnement et au transfert des patients alités : passage de la position couchée sur le dos à la position latérale et inversement, déplacement vers le haut ou sur le côté du lit, mobilisation vers et depuis le bord du lit, ainsi qu'aide à la mise en position ventrale et à la mise en place d'un harnais. Il réduit, voire élimine, les efforts de poussée et de traction à l'origine de nombreuses blessures chez les soignants, contribuant ainsi à diminuer la charge de travail et les arrêts maladie.

La plupart des patients qui ont besoin d'aide pour se repositionner bénéficient d'un mouvement plus calme et plus fluide, car le drap enveloppe doucement le patient tandis que le soignant se contente de guider ses bras et les jambes en place. Ce mouvement fluide réduit les forces de cisaillement et les frottements, ce qui le rend particulièrement adapté aux patients présentant un risque d'escarres ou qui s'agitent facilement.

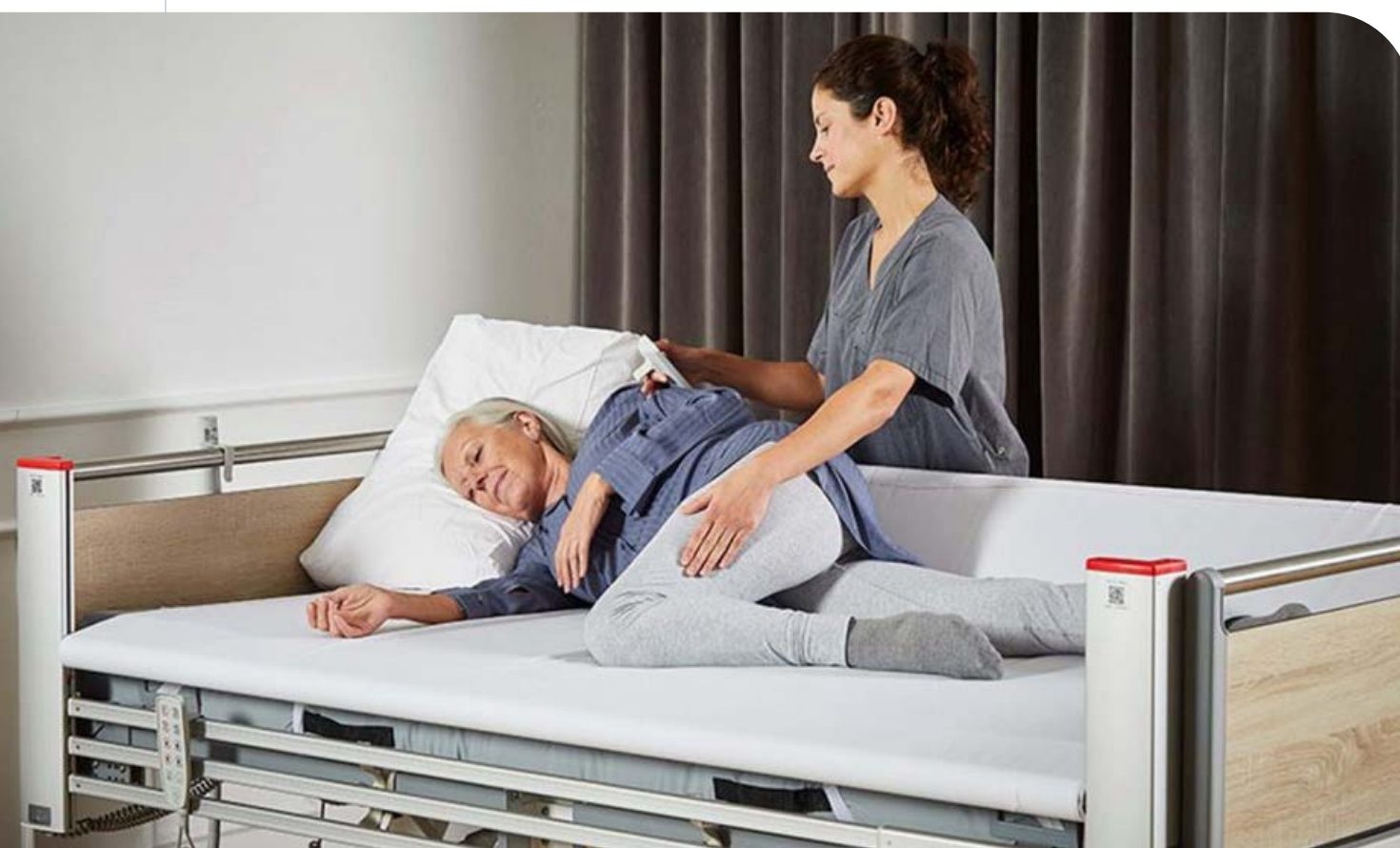

1

Un repositionnement en douceur

Le mouvement fluide et en douceur réduit les forces de cisaillement et de frottement et apaise les patients anxieux. Un réglage de la vitesse permet de réduire la vitesse des barres à 75 % ou 50 %, pour que le patient et le soignant se sentent à l'aise.

2

Hygiénique et facile à installer

Les composants électriques sont intégrés dans les montants d'angle, ce qui permet de laver le système en machine sans le démonter. Il s'installe sans actionneurs sous le lit, s'adaptant ainsi à une plus grande variété de cadres de lit.



> Écrous de déverrouillage d'urgence

sur les quatre montants d'angle pour un abaissement manuel rapide

> Bouton de levage

sur le montant d'angle pour un réglage facile de la hauteur

> Télécommande ergonomique

pour les rotations et les changements de position

> Système de fixation rapide « Quick-Tag »

enfoncées dans une rainure de la barre, durables et hygiéniques

> Les côtés télescopiques permettent

d'ajuster la longueur pour s'adapter à différents types de lits

> Barre latérale intégrée


les barres relevées font office de barrières latérales ; abaissées, elles se situent à 2,5 cm sous le matelas pour faciliter l'accès au lit et la sortie de celui-ci

Caractéristiques techniques ▼



Charge utile ▼

250 kg*

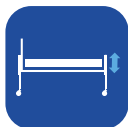

Réglage en hauteur ▼

jusqu'à 120 mm



Longueur ▼

Côtés
télescopiques
adaptés à
différents types
de lits



Nettoyage ▼

Lavable en
machine sans
démontage

*La norme VENDLET doit toujours être prise en compte en fonction du poids maximal de l'utilisateur du lit. Voir le mode d'emploi.

Tel: +33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

