

Topaz



Robustesse et confort



Invacare Topaz a été spécialement conçu pour répondre aux besoins uniques des personnes de très forte corpulence (jusqu'à 318 kg). Il est à la fois très robuste grâce à son châssis en acier et son double croisillon, mais également confortable grâce à ses manchettes d'accoudoirs en mousse et à sa toile d'assise en nylon. La position de ses roues arrière ainsi que le design de son châssis lui assurent une grande stabilité quelle que soit sa largeur d'assise : 660, 710 ou 760 mm.

Manœuvrable en toute sécurité


Les deux positions du palier de roues arrière permettent une modification simple et rapide de la hauteur d'assise arrière à 445 ou 495 mm.

Des accoudoirs robustes

Les accoudoirs de *Invacare Topaz* ont été spécialement conçus pour supporter le poids d'une personne obèse tout en apportant un bon positionnement.



Caractéristiques et Options

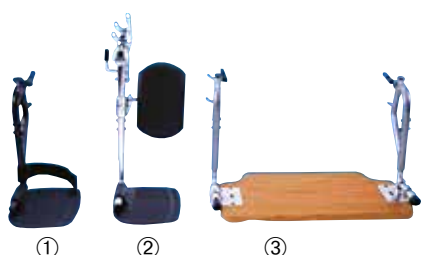

Potences, repose-jambes et palettes

Offrent un positionnement optimal pour les pieds avec le choix parmi les potences à 70° ① les repose-jambes ② et la palette monobloc ③



Accoudoirs fixes manchettes courtes

Châssis renforcé

Double croisillon et fourches renforcés.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Largeur hors-tout avec potence
<i>Invacare Topaz</i>	660 / 710 / 760 mm	460 / 510 mm	445 / 495 mm	410 / 430 / 460 mm	230 mm	Largeur d'assise + 240 mm	830 - 930 mm	1250 mm
<i>Invacare Topaz</i>	Largeur pliée hors-tout	Poids du fauteuil	Poids max. utilisateur					
<i>Invacare Topaz</i>	370 mm	40 kg	318 kg					

Coloris du châssis

Noir



Revêtement du siège

Nylon noir

