

matrix[®]
SEATING SERIES

Contour Visco^{NG}




Le coussin qui s'adapte à la
forme du corps de l'utilisateur



Le coussin *Invacare Matrx Contour Visco^{NG}* est un coussin galbé composé à 100% de mousse viscoélastique. Il offre d'excellentes propriétés de redistribution des points de pression afin d'améliorer le confort de l'utilisateur et stabiliser son bassin. Son design permet une traction podale et l'accès aux tables et aux bureaux.

Design arrière

► Le design particulier de l'arrière du coussin offre davantage de soutien au bassin et permet d'optimiser son positionnement. Il peut loger facilement sous la toile de dossier ou sous un dossier rigide. Maximiser la surface de contact améliorera la redistribution des points de pression et la protection cutanée.

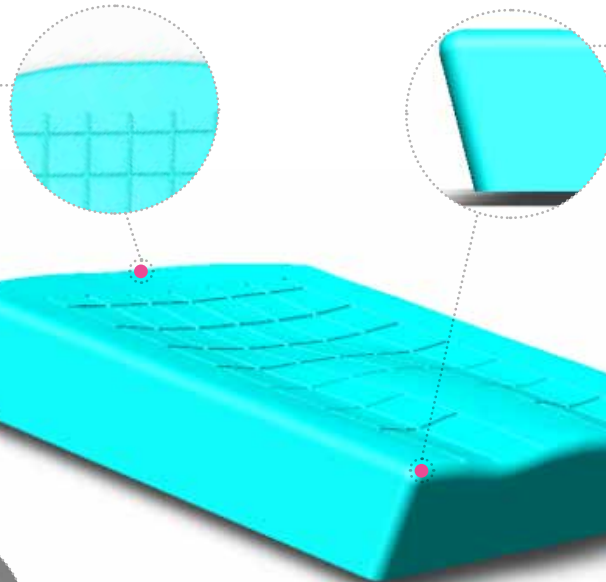

Bord avant biseauté

► Apporte un maximum de soutien aux cuisses pour un meilleur positionnement des membres inférieurs et une meilleure redistribution des points de pression, sans compromis sur la zone du creux poplité. Le bord avant biseauté permet aux utilisateurs ayant des ischio-jambiers tendus d'avoir un positionnement du pied à 90° ou de déplacer son fauteuil par traction podale.



► Le coussin *Matrx Contour Visco^{NG}* procure une immersion et un enveloppement excellents. Lorsqu'il s'assoit sur le coussin, l'utilisateur sent la mousse viscoélastique s'adapter doucement à la forme de son corps pour augmenter la surface de contact et donc améliorer la redistribution de la pression.

Le coussin *Matrx Contour Visco^{NG}* est disponible en diverses dimensions et différentes capacités de poids maximum. Il inclut deux housses noires avec chacune deux fermetures à glissière, faciles à retirer pour être nettoyées. Les housses sont imperméables et bi-extensibles pour conserver une immersion efficace du corps dans la mousse. Le coussin reste bien en place grâce à sa base grise anti-dérapante et sa poignée de préhension lui permet d'être déplacé d'une surface à l'autre facilement.

Données techniques ▼


Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à cet accessoire.



Largeur ▼



Profondeur ▼

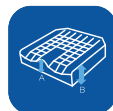

Hauteur ▼



Hauteur ▼



Poids total ▼



Poids max. utilisateur ▼



Température de nettoyage max. ▼



	Largeur ▼	Profondeur ▼	Hauteur ▼	Hauteur ▼	Poids total ▼	Poids max. utilisateur ▼	Température de nettoyage max. ▼
Matrx Contour Visco^{NG}	355 mm 380 mm 405 mm 430 mm 455 mm 480 mm 505 mm	405 mm 430 mm 455 mm 530 mm	A=100mm B=100mm	90mm	1.3kg	140kg	90°

Ce coussin est conforme aux normes EN1021-1 Cig et EN1021-2 Match

Tel. : +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France