

Action® Vertic



Prenez de la hauteur !




Le fauteuil *Invacare Action Vertic* est un fauteuil à propulsion manuelle et à verticalisation électrique. Il est dédié aux utilisateurs actifs qui souhaitent se verticaliser tout en préservant leur énergie pour la propulsion. Ils bénéficient ainsi pleinement des bienfaits de la verticalisation : indépendance, bien-être, stimulations physiologiques et relationnelles.

Un mouvement de verticalisation précis

Le mouvement de verticalisation du fauteuil *Invacare Action Vertic* a été particulièrement étudié : les deux rotations au niveau des genoux et du bassin et la translation au niveau du segment jambier respectent la cinématique physiologique.

Le bon positionnement de l'utilisateur est facilité par le dossier réglable en tension. Celui-ci est maintenu lors de la verticalisation par les appuis sous-rotuliens et les ceintures abdominale et pectorale.

Caractéristiques et Options

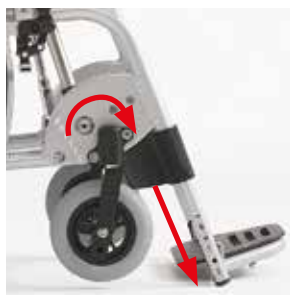

Système de compensation du segment jambier

Système breveté qui permet le coulisement des tubes avant et la prise d'appui sur le sol.



Ceintures abdominale et pectorale

Indispensables lors de la verticalisation pour un bon maintien du tronc.



Roulettes anti-bascule



Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	UL	Position verticalisée	Largeur hors-tout
380 / 430 / 480 mm	410 - 460 / 460 - 510 mm	500 mm	320 - 475 mm	150 - 230 mm	405 - 460 mm	1360 mm	Largeur d'assise + 190 mm
Hauteur hors-tout	Pente d'assise	Largeur hors-tout avec potence	Longueur hors-tout sans potence	Poids du fauteuil	Poids max. utilisateur	Batterie	
865 mm	4°	340 - 480 mm	840 - 980 mm	27 kg	115 kg	24V x 3,8 Ah	

Coloris du châssis



Revêtement du siège

