

SB[®] 755 90



Bien-être et Innovation



La conception originale du lit *Invacare SB 755* apporte un réel confort, à la fois pour le patient et la tierce personne, tant au domicile qu'en collectivités. Le lit **SB 755** a été conçu avec un kit intégré, la base servant de support pour le transport chez les différents utilisateurs. Combiné à la conception innovante du relèvement-jambes qui descend en dessous de l'horizontal du plan de couchage (plicature et relèvement-jambes électriques indépendants), le patient peut passer d'une position allongée à une position dite « fauteuil » qui lui offre un confort optimal et assure une bonne prévention des escarres. Le lit **SB 755** est équipé d'accessoires innovants : Barrière Line en aluminium conforme à la norme 60601-2-52, panneaux Victoria avec intérieur détachable pour l'accès aux pieds et à la tête, extension de plan de couchage jusqu'à 200 mm. Ce lit a été conçu pour des patients pesant jusqu'à 200 kg.



Un confort unique !

La conception du relèvement-jambes électrique qui descend en dessous de l'horizontal du plan de couchage, combinée avec un relèvement-buste à translation, assure au patient un confort unique, une position assise au lit et une décharge talonnière dans le cadre de la prévention des escarres. La translation sur le relèvement-buste permet de minimiser le glissement du patient vers le pied du lit et donc atténue les effets de friction et de cisaillement.



Options innovantes

Le lit **SB 755** a été conçu avec un design original alliant aluminium et bois. Une offre de panneaux est disponible en coloris Hêtre ou Merisier. Le panneau **Victoria** avec intérieur bois amovible permet d'effectuer facilement des soins au niveau des pieds. La barrière **Line** en aluminium est une barrière pleine, disponible dans les 2 coloris.

Options et Configurations



Relèvement-buste à translation afin d'atténuer les effets de friction.



Panneau **Victoria** avec intérieur amovible pour faciliter les soins au niveau des pieds.

Options et Configurations



Potence de lit



Panneau Susanne hêtre avec rail, pour barrières bois ou époxy.

Chaque partie du lit **SB 755** est démontable et pèse moins de 25 Kg.

Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur hors tout / Largeur plan de couchage	Longueur hors tout / Longueur plan de couchage	Hauteur plan de couchage / Hauteur totale	Dimensions du plan de couchage	Garde au sol	Angle du Relève-buste	Angle plicature genoux
SB 755 90	950/1010 mm	2080 mm, 2130 mm	350-820 mm Hauteur totale: 1600-2070 mm	800 - 260 - 260 - 680 mm	Garde au sol 170 mm	0° - 73°	0° - 28°


	Angle négatif repose-jambe	Angle repose-jambes	Angle par rapport au plan de couchage	Poids maxi utilisateur	Heaviest part of the product
SB 755 90	0 - 16°	0 - 18°	25° au dessus 14° en dessous	Poids patient max : 200 kg Charge de fonctionnement : 235 kg	Chaque partie du plan de couchage pèse moins de 25 kg



Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l'âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est équivalente ou plus petite à celle d'une personne de moins de 12 ans.

NF EN 1970/A1 - NF EN 14971
Barrières Line, Verso II, Britt V: 60601-2-52 et 1970/A1
Lit = 60601-2-52

Coloris Plan de couchage et Bois

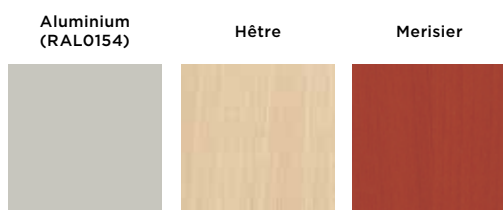

Accessoires



Filet Nylon

Pour barrières **Britt V, Line**.
1449590 (unité)



Protection Vinyle rembourré

Pour barrières **Britt V, Line**.
1449588 (unité)



Barres pare-chocs

Pour lit **SB755 90**.
Position avant/arrière ou
sur le côté, coloris gris.




Anita

Pour lit **SB755 90** coloris
merisier.
Compatibles avec les
barrières **Verso II, Line,**
Britt V.
Avec rail
AP1523473-0102



Victoria

Pour lit **SB755 90** coloris
merisier.
Compatibles avec les
barrières **Verso II, Line,**
Britt V.
Avec rail avec intérieur
amovible
AP1523804-0102

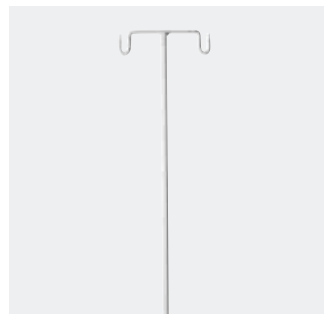

Tige porte-serum Acier Epoxy

à fixer sur le cadre de lit.
Fixation: **AP50.60910.00**
Tige: **AP50.60030.DO**



Tablette

En bois pour lit **SB755**
90. Coloris hêtre/blanc.