

matrx[®]
SEATING SERIES

Coussin Libra[®]



Une solution complète



- Design innovant combinant une base en mousse et une poche de gel fluide pour optimiser la protection de la peau, le positionnement et l'adaptation au besoin spécifique de chaque utilisateur
- Son galbe favorise l'équilibre et la stabilité du bassin et apporte plus de mobilité à l'utilisateur
- La poche de gel fluide compartimentée améliore la gestion du cisaillement
- Sans entretien, le **Libra** s'adapte aux besoins de prévention et de positionnement de l'utilisateur tout en convenant à un style de vie actif
- Recommandé pour tous les utilisateurs incluant ceux présentant un risque très élevé de lésions cutanées



Design unique

- Base en mousse - galbe anatomique pour optimiser le maintien et le positionnement du bassin
- Durabilité de la mousse haute résilience bénéficiant du traitement Ultra-Fresh™ contre la prolifération des bactéries et des odeurs
- Poche de gel fluide - Double couche compartimentée pour un maximum de protection au niveau des reliefs osseux

Bénéfices fonctionnels

- Butée pelvienne prévenant le glissement et réduisant le risque de cisaillement
- Soutien des grands trochanters favorisant la stabilité du bassin latéralement
- Extension du bord postérieur du coussin pour prévenir la bascule postérieure du bassin
- Découpe biseautée à l'avant pour s'adapter à des ischio-jambiers tendus et à la traction podale
- Galbe favorisant l'alignement des cuisses

Fiabilité et légèreté

- Gel fluide non sensible à la température. Pas d'entretien nécessaire
- Le coussin **Matrx Libra** est léger (poids à partir de 1,6 kg) et convient à un style de vie actif
- Pour des besoins d'adaptations plus importants, une gamme d'accessoires de positionnement est disponible



Caractéristiques et options



Enveloppement

Surface d'appui augmentée favorisant la répartition des appuis.

Répartition des appuis

Poids réparti entre le bassin et les cuisses pour réduire la pression sur les zones à risque.


Immersion

Les reliefs osseux s'immergent confortablement dans la poche de gel fluide pour une protection optimale.

Réduction du cisaillement

Le design unique du coussin permet des mouvements du bassin contrôlés et évite le glissement.

Caractéristiques et options

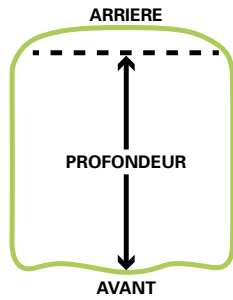

Bord avant biseauté

Facilite les transferts et la traction podale.

Dimensions du coussin

Profondeur réelle = Profondeur + 38 mm.

Bord postérieur du coussin

Une extension de 38 mm augmente la surface du coussin et permet de stabiliser la poche de gel fluide lors d'une bascule d'assise. Encoche en regard du coccyx pour soulager les appuis.



Biseau crural

Prévient le glissement et réduit le cisaillement.

Biseau crural découpé

Pour une hanche limitée en flexion et/ou hauteur d'assise abaissée pour la traction podale.



Butée d'adduction

Pour accentuer le soutien en adduction.

Biseau fessier

En cas d'obliquité pelvienne lors d'une mise en place à l'arrière du coussin.



Biseaux latéraux

Améliorent la stabilité latérale pour favoriser l'alignement des cuisses le long de l'axe médian.

Poche de gel fluide supplémentaire

Pour une protection ciblée ou en cas d'obliquité.

Plot d'abduction

Favorise un bon alignement des cuisses et des hanches.

Poche sur le côté pour un rangement pratique

Boucle attachée à la fermeture éclair pour faciliter l'ouverture de la poche.

Tailles disponibles

Version standard en mm : largeur x profondeur Poids maximum utilisateur : 136 kg

360 x 310	380 x 410	410 x 410	430 x 410	460 x 410	480 x 410	510 x 410
360 x 360	380 x 460	410 x 460	430 x 460	460 x 460	480 x 460	510 x 460
360 x 410	380 x 510	410 x 510	430 x 510	460 x 510	480 x 510	510 x 510

Version bariatrique en mm : largeur x profondeur Poids maximum utilisateur : 227 kg

530 x 460	560 x 460
530 x 510	560 x 510
530 x 560	560 x 560

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.


	Poids	Poids max utilisateur	Revêtement extérieur lavable en machine à	Protection intérieure	Hauteur	Hauteur
Matrx Libra	à partir de 1,6 kg ¹	Standard : 136 kg Bariatrique : 227 kg	80°	Nettoyage avec un chiffon humide	A: 89 mm/ B: 89 mm	70 mm



1. Varie selon la dimension du coussin


Housses

Revêtement noir

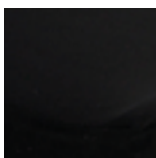

bi-extensible
imperméable et
déperlant

Revêtement
Mesh noir

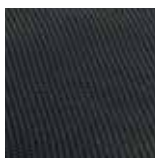

respirant
micro-aéré