

# Kirilos



Maniabilité, Sécurité et  
Confort pour TOUS !



Le lève-personnes *Invacare Kirilos* a été conçu pour un usage au domicile et en collectivité. Sa base très compacte permet d'effectuer des transferts même dans des espaces très exigus. Polyvalent, le **Kirilos** a une capacité de levage de 140 kg et apporte de nombreux avantages en terme de maniabilité et de fonctionnalité.

Equipé d'un fléau 2 points, il est livré avec une sangle universelle standard permettant de choisir une position assise ou plus allongée.


### Maniabilité

- Roulettes doubles (freinées à l'arrière) pour une maniabilité optimale quel que soit le type de sol.
- Piètement à écartement variable.
- Démontable en 2 parties : Facilite le transport, démontage très rapide.
- Fléau 2 points avec possibilité de rotation à 360° pour permettre de positionner le patient au mieux et de maximiser son confort.
- Télécommande ergonomique Linak pour une meilleure manipulation **NOUVEAU**

### Motorisation de qualité


- **Kirilos** est équipé d'une motorisation Linak, **NOUVEAU** pour toujours plus de qualité
- Indicateur sonore et visuel par 3 LEDS de la charge des batteries
- Commande de descente d'urgence électrique sur l'unité centrale en cas de décharge complète des batteries
- Indicateur visuel de panne avec LED de diagnostic
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Clé permettant de couper l'alimentation du vérin
- Descente d'arrêt d'urgence mécanique **NOUVEAU**

### Caractéristiques et options

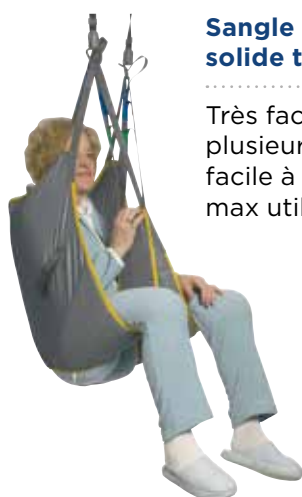

#### Sangle universelle standard solide taille M

Très facile à installer avec plusieurs réglages et très facile à nettoyer (95°). Poids max utilisateur : 200 kg.

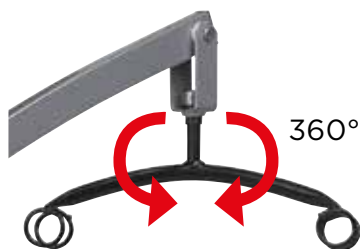

#### Fléau 2 points avec attache anti-retour pour plus de sécurité

Pivote à 360°.


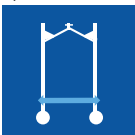










#### Unité centrale Linak

Livré avec une batterie détachable. Chargeur intégré.

### Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Longueur hors-tout de la base	Largeur intérieure: pieds fermés	Largeur intérieure: pieds ouverts	Hauteur Min. et Max.	Hauteur des pieds	Poids maxi utilisateur	Poids total du produit	Nombre de cycles
 1190 mm	 700 mm	 900 mm	 600 - 1490 mm	 110 mm	 140 kg	 35 kg	 52 cycles

 Batteries 4,5 Ah Charge 3-4h	 Diamètre des roues 75 mm
--	---

### Coloris



Code : 935767