

matrx[®]
SEATING SERIES

Coussin Vi



Yes, you can.[®]



Le coussin *Invacare Matrix Vi* a été conçu pour le positionnement et la prévention des escarres pour risque moyen à élevé. Sa conception unique en trois parties grâce à une combinaison de différentes mousses procure une prévention ciblée sur les parties les plus à risque du patient et apporte un excellent niveau de stabilité et de confort.



① Housse externe :

Imperméable et respirante grâce à sa finition mesh, elle inclut une base antidérapante, deux bandes velcro et une poignée.

② Housse interne :

Imperméable et zippée pour un accès facile à la mousse.

③ Couche supérieure :

Mousse Haute Résilience (HR) Soft pour un confort et un soutien optimal. Sa cuvette ischiatique favorise la stabilité du bassin et son galbe, le bon alignement au niveau des membres inférieurs. Traitement anti-bactérien **Ultra-Fresh™** limitant la prolifération des bactéries et les mauvaises odeurs.


④ Insert en mousse visco-élastique :

Disque en mousse visco-élastique en regard de la zone ischiatique/sacrée permettant l'immersion des reliefs osseux.

⑤ Couche inférieure :

Mousse Haute Résilience (HR) Ferme pour le soutien et la durabilité. Appui en regard des grands trochanters pour répartir les appuis et favoriser la stabilité des hanches.

Caractéristiques

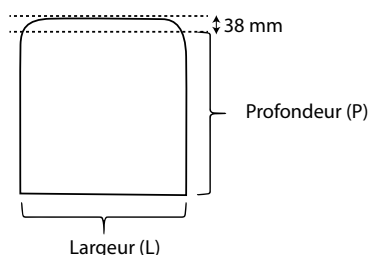

Largeur réelle : L - 12,5 mm pour couvrir plusieurs largeurs d'assise.
Profondeur réelle : P + 38 mm pour couvrir plusieurs profondeurs d'assise.

Découpe biseautée à l'avant. Elle permet de s'adapter à des ischio-jambiers tendus, la traction podale et les transferts.

Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.


	Largeur	Profondeur	Hauteur A / B	Hauteur en regard de la cuisse	Poids	Poids max	Housse externe lavable à
Matrix Kidabra-Vi	310 - 360 mm	310 - 360 mm	70/73 mm	50 mm	à partir de 0,5 kg ¹	68 kg	60°
Matrix Vi	360, 410, 430, 460, 510, 560 mm	380 - 510 mm	82.5/95 mm	63,5 mm	à partir de 0,9 kg ¹	136 kg	60°

1. varie selon les dimensions du coussin

Couleurs et options

Revêtement Mesh noir imperméable et respirant

Tissu Kid*ab*ra en standard sur les tailles enfant (KA-Vi)

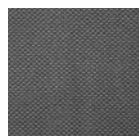

Kit d'Obliquité
 Pelvienne facile à installer sur tous les coussins *Matrix Vi* et *Kid*ab*ra-Vi*. (adapté pour obliquités jusqu'à 25 mm)