

matrx[®]
SEATING SERIES

Flo-tech[™] **Contour Visco**



Conception originale!



Le coussin **Flo-tech Contour Visco** est composé d'une base en mousse Haute Résilience de 40 kg/m³ recouverte d'une mousse viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m³. Ce coussin moulé bénéficie d'une forme anatomique et d'une hauteur de mousse viscoélastique sous les ischions supérieure à 60 mm. Il favorise ainsi l'immersion des parties du corps en contact avec le support et de ce fait assure une bonne répartition des points de pression.

De multiples découpes pour toujours plus de confort!

Les coussins **Flo-tech Contour Visco** sont disponibles sous 2 formes différentes


- **Contour Visco** : Hauteur de 90 mm
- **Contour Visco** pour fauteuils de confort : hauteurs de 90 mm et profondeur de 530 mm.

Caractéristiques



Revêtement imperméable et déperlant

Equippé d'une sangle de préhension.

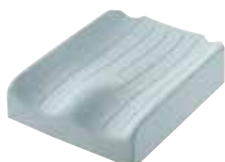

Modèle spécifique pour fauteuils de confort *Rea Azalea* et *Clematis*

4 tailles disponibles, profondeur 530 mm, portance ferme.



Trois densités de mousse

Ferme (poids patient max 100 kg), médium (poids patient max 75 kg) et très ferme (poids patient max 125 kg).

Le coussin **Contour Visco** est équipé d'une découpe toile d'assise pour compenser l'effet hamac éventuel d'une toile ainsi qu'une découpe au niveau des tubes de dossier pour maximiser la profondeur d'assise du fauteuil. Un galbe assure un bon positionnement du patient avec plot d'abduction et un soutien latéral.



Base en mousse Haute Résilience

Structure le coussin.



Mousse viscoélastique à mémoire de forme

La mousse viscoélastique sous ischions d'une hauteur supérieure à 60 mm favorise une bonne immersion de la partie ischiatique



Conception originale grâce aux deux mousses

Vue de dessous.

Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur en regard de la cuisse	Poids	Poids max	Housse externe lavable à	
Matrix Flo-tech Contour Visco	355 mm 380 mm 405 mm 430 mm 455 mm 480 mm 505 mm 600 mm	405 mm 430 mm 455 mm 530 mm 560 mm	A : 12 mm B : 12 mm	90 mm	A partir de 1.60 kg	125 kg	80°	

Coloris du revêtement

Revêtement noir bi-extensible imperméable et déperlant

